


Basic-sugepumpe

Tekniske oplysninger

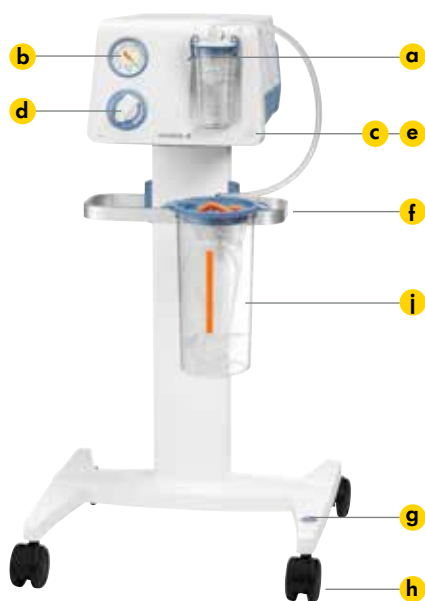

Stationær udgave

- a Sikkerhedssæt
- b Vakuummåler i kPa og mmHg
- c Tænd-/sluk-knap
- d Vakuuminstilling
- e Standby-indikator
- f Standardskinne
- g Fodbetjent tænd-/sluk-kontakt
- h Fire styrehjul med bremser
- i Bærehåndtag

Basic er en sugepumpe af høj kvalitet, der giver maksimal sugestyrke til en række sugebehov. Den er let at håndtere og genbehandle og er udstyret med sikkerhedsfunktioner, der sikrer optimal drift – en ideel kombination. Med det omfattende tilbehørssortiment fra Medela kan pumpen konfigureres til mange forskellige medicinske anvendelsesområder.

Tilsluttet anvendelse/formål

Den påtænkte anvendelse af Basic-sugepumpe er etablering og opretholdelse af et konstant vakuum i intervallet fra 0 til -90 kPa.

Indikationer for brug

Basic-sugepumpe er angivet til alle anvendelsesområder, der kræver vakuum, såsom almen kirurgi, fedtsugning, endoskopi, epikardial ablation, nasopharynx-sug, neurokirurgi, OPCAB, kejsersnit/forløsning med sugekop, samt sårdrænage på hospitaler, klinikker og i lægepraksisser.

VIGTIGE DIFFERENTIATORER

At give driftssikker og enkel sugning, på en hygiejnisk måde

Basic-pumpen er en driftssikker og enkel sugepumpe til alle anvendelsesområder på hospitalet, på klinikken og i lægepraksissen, der kræver en kraftig vakuuminstilling, inkl. endoskopi, sugning af luftveje, kejsersnit/forløsning med sugekop og sårdrænage.

Gør det enkelt

Med Basic-sugepumpe stræbte Medela efter enkelthed. Tænd for pumpen med fodkontakten, der er indbygget i rullestativet, eller ved at røre ved knappen på huset. Justér vakuummet med den intuitive membranvakuuminstilling. Der kan monteres valgfrit tilbehør afhængigt af dine behov. Forenklet indvendig konstruktion minimerer arbejdet i forbindelse med rutinekontroller, hvilket sparer på omkostningerne.

Fungerer når og som den skal

Medelas schweiziske opfindsomhed har resulteret i den lange levetid, som vores pumper er kendt for. Virksomhedens knowhow, holdbare materialer og en intelligent konfiguration bidrager til Basic-sugepumpens driftssikkerhed.

Håndtering af hygiejneproblemer

Hygiejneproblemer har påvirket både design og funktion af Basic-sugepumpen og dens valgfri tilbehør. Medela har været meget opmærksom på placering og udformning af betjeningslementer for at mindske potentielle kontamineringsrisici.

Produktkoder

Varenumre	Stationær Basic: 071.0001, 101046580 (kun i Brasilien), 101046565 (kun i USA og Canada) Bærbar Basic: 071.0000, 101046579 (kun i Brasilien), 101046564 (kun i USA og Canada) Rullestativ til den mobile version af Dominant Flex/Basic: 071.0034
-----------	--

Servicemanualen	200.6366 (DA)
-----------------	---------------


Pumpespecifikationer

Maks. vakuum [kPa/mmHg]	-90/675 (± 15 % tolerance)			
Flow [l/min]	≥ 30 l/min frit luftflow ved havoverfladen ($p = 1013$ mbar), men ikke mere end 10 l/min over det nominelle flow.			
Mål B/H/D [mm/tommer]	Stationær udgave	305 (12,0)	210 (8,3)	375 (14,8)
	Bærbar udgave	305 (12,0)	285 (11,2)	375 (14,8)
	Stationær/rullestativ	510 (20,1)	985 (38,8)	470 (18,5)
Vægt [kg/lbs]	Stationær udgave	9,3 (20,5)		
	Bærbar udgave	9,5 (20,9)		
	Stationær/rullestativ	16 (35,3)		
Drivenhed	Stempel-/cylinderteknologi			
Strømforbrug [W]	50			
Strømforbrug [W] i standby-tilstand i henhold til EF-standard nr. 1275/2008	< 1			
Støjniveau [dB(A)]	≤ 47			
Vakuuminstilling	Membran			
Beskyttelse mod elektrisk stød	Type CF (til brug i eller nær hjertet: maks. jordlækstrøm 10 μ A)			
Klassificering af medicinsk udstyr – i henhold til 93/42/EØF og forordning (EU) 2017/745	Klasse IIa			
Beskyttelse mod elektrisk stød	Klasse I-udstyr			
Kapslingsgrad	IP22			
Potentialudligningsleder	På pumpe og på valgfrit rullestativ			
Kabinetmateriale	ABS			
Tænd-/sluk-knap	CleanTouch-teknologi			
Overløbssikringsanordning	Sikkerhedssæt med mekanisk overløbssikring			
Garanti [år]	5			
Automatisk spændingsdetektion	Ja			
Strømkablets længde [m]	5			
Driftstemperatur, relativ luftfugtighed	5 til 40 °C/30-75 %			
Transport-/opbevaringstemperatur, relativ luftfugtighed	-20 til +55 °C/20-95 %			
Fremstillet i	Schweiz			
Første år for salg	2013			
IEC 60601-1: 2005, Udgave 3.2 opfyldt	Ja			

Specifikationer for rullestativ

Antistatiske styrehjul	Ja, alle 4
Antal styrehjul med bremser	4
Styrehjulenes diameter [mm]	75
Tænd-/sluk-kontakt indbygget i rullestativet	Ja
Ækvipotentialeleder på rullestativ	Ja
Standardskinne	Ja

Flow ved forskellige vakuuminstillinger

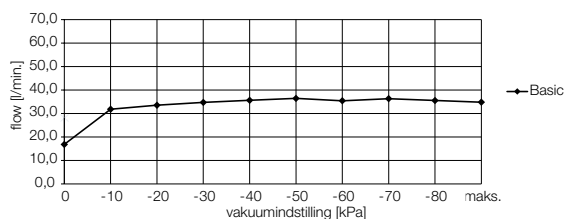

◀ Konklusion: Allerede ved -10 kPa nås den annoncerede flowrate. Brugeren har fuld sugkapacitet ved selv lave vakuumniveauer.

Primært kompatibelt tilbehør

Engangsopsamlingsystem	Varenummer
Sugeglas PC, 1,5 l	077.0082
Engangssugepose, 1,5 l	077.0083
Engangssugepose, 1,5 l, med geleringsgranulat	077.0084
Sugeglas PC, 2,5 l	077.0085
Engangssugepose, 2,5 l	077.0086
Engangssugepose, 2,5 l, med geleringsgranulat	077.0087

To eller flere sugeglas fra engangsopsamlingsystem

	Varenummer
Omskifterventil	077.0563
Seriekobling, vakuum	077.0095
Seriekobling, patient	077.0160
Rullestativ til op til 5 yderligere glas	077.0188

Flegangsopsamlingsystem

	Varenummer
1 l sæt til flegangsbrug med PSU-sugeglas med klemmeholder	077.0701
2 l sæt til flegangsbrug med PSU-sugeglas med klemmeholder	077.0702
3 l sæt til flegangsbrug med PSU-sugeglas med klemmeholder	077.0703
5 l sæt til flegangsbrug med PSU-sugeglas med klemmeholder	077.0705
Dobbelt 2 l sæt til flegangsbrug med PSU-sugeglas	077.0707
Dobbelt 3 l sæt til flegangsbrug med PSU-sugeglas	077.0704
Dobbelt 5 l sæt til flegangsbrug med PSU-sugeglas	077.0706
1 l sæt til flegangsbrug med PSU-sugeglas uden klemmeholder (til bærbare udgaver)	077.0715
2 l sæt til flegangsbrug med PSU-sugeglas uden klemmeholder (til bærbare udgaver)	077.0716

To eller flere sugeglas fra flegangsopsamlingsystem

	Varenummer
Omskifterventil	077.0563
Flegangs seriekobling	077.0542
Rullestativ til op til 5 yderligere glas	077.0188

Betjeningsknapper

	Varenummer
Fodbetjent tænd-/sluk-kontakt	077.0723
Fodbetjent vakuumregulator	077.0731

Filtre

	Varenummer
Virusfilter til engangsbrug med Medela-kobling	101035265
Overløbssikrings-/bakteriefilter til engangsbrug med Medela-kobling	077.0571
Bakteriefilter til engangsbrug med Medela-kobling	077.0573
Bakterie-/lugtfilter til engangsbrug med Medela-kobling	077.0575
Virusfilter med overløbssikring til engangsbrug med Medela-kobling	101035263

Vakuumslange, silikone

	Varenummer
Silikoneslange Ø 7 x 12 mm, uden koblingsstykker, 25 m	077.0900
Silikoneslange Ø 7 x 12 mm, uden koblingsstykker, 1 m	077.0901
Silikoneslange Ø 7 x 12 mm, uden koblingsstykker, 2 m	077.0902
Silikoneslange Ø 7 x 12 mm, uden koblingsstykker, 5 m	077.0905
Silikoneslange Ø 7 x 12 mm, med 1 koblingsstykke, 60 cm	077.0912
Silikoneslange Ø 7 x 12 mm, med 1 koblingsstykke, 100 cm	077.0913
Silikoneslange Ø 7 x 12 mm, med 2 koblingsstykker, 30 cm	077.0921
Silikoneslange Ø 7 x 12 mm, med 2 koblingsstykker, 60 cm	077.0922
Silikoneslange Ø 7 x 12 mm, 25 cm, med 1 koblingsstykke og 1 koblingsstykke 90°	077.0931
Silikoneslange grøn Ø 6,5 x 12,5 mm, 180 cm med koblingsstykke	077.0961
Silikoneslange Ø 7 x 12 mm, 60 cm, med 1 koblingsstykke og 1 koblingsstykke 90°	077.0185
Silikoneslange, Ø 5 x 10 mm, 25 m	077.0970

Patientslange, til engangsbrug	Varenummer
Slange (PVC) til engangsbrug, 180 cm, med fingertipkontrol, steril	077.0951
Slange (PVC) til engangsbrug, med universaltragte, 150 cm, steril	077.0184
Slange (PVC) til engangsbrug, uden koblingsstykker, 150 cm, steril	077.0170
Slange (PVC) til engangsbrug, med 1 trinvist konisk konektor, 180 cm, usteril	077.0952

Patientslange, til flergangsbrug	Varenummer
Silikoneslange, transparent, 32 cm	077.0053
Silikoneslange, transparent, 120 cm	077.0055
Silikoneslange, transparent, 150 cm	077.0056

Forløsning med sugekop, til engangsbrug	Varenummer
Silc-sugekop til engangsbrug, Ø 60 mm	077.0791
Bird-sugekop til engangsbrug, Ø 50 mm	077.0792

Forløsning med sugekop, til flergangsbrug	Varenummer
Bird anterior sugekop, 60 mm, komplet med håndtag og silikoneslange 150 cm	077.0171
Bird anterior sugekop, 50 mm, komplet med håndtag og silikoneslange 150 cm	077.0172
Bird anterior sugekop, 40 mm, komplet med håndtag og silikoneslange 150 cm	077.0173
Bird posterior sugekop, 50 mm, komplet med håndtag og silikoneslange 150 cm	077.0174
Silc-sugekop, Ø 50 mm, blå	077.0761
Silc-sugekop, Ø 60 mm, gul	077.0762
Silc-sugekop med trompetventil, Ø 60 mm	077.0078
CaesAid-sugekop	077.0080

Ekstraudstyr	Varenummer
Slangeholder, venstre side	077.0751
Slangeholder, højre side	077.0752
Klemmeholder, plastik	077.0521
Vægbeslag, enkelt	077.0523
Vævsprøvekop til engangsbrug, Ø 6-10 mm (til flergangsopsamlingsystem)	077.0562
Vævsprøvekop til engangsbrug, Ø 10-14 mm (til flergangsopsamlingsystem)	077.0564
Vævsprøvekop til engangsbrug til engangsopsamlingsystem	077.0094



Medicinsk vakuumenteknologi for sundhedsprofessionelle
Kontakt os eller din lokale Medela-repræsentant for nærmere detaljer.

Medela Medical AB
Kemistvägen 17
18379 Täby
Sweden
Phone +46 8 588 03 200
Fax +46 8 588 03 299
info@medela.se
www.medela.se

 Medela AG
Lättichstrasse 4b
6340 Baar
Schweiz
www.medela.com

Lokal kontakt