

Vakuumentzugssystem




ZUVERLÄSSIGKEIT UND FLEXIBILITÄT



Medela Basic für Vakuumentzugen

Zuverlässige Vakuumextraktion

Das Vakuumextraktionssystem von Medela hilft zuverlässig und flexibel, wenn im Geburtsprozess der Einsatz einer Saugglocke erforderlich ist. Die Medela Basic Absaugpumpe, starre oder weiche, Mehrweg oder Einweg Saugglocken, und umfangreiches Zubehör ergeben zusammen eine Komplettlösung für die Vakuumextraktion. Die Absaugpumpe Basic ermöglicht einen schnellen und effizienten Vakuumaufbau, eine einfache Wartung und genaue Vakuumeinstellungen. Dank eines konsistenten aktiven Vakuums wird die Saugglocke sicher positioniert und ein Ablösen kann verhindert werden.

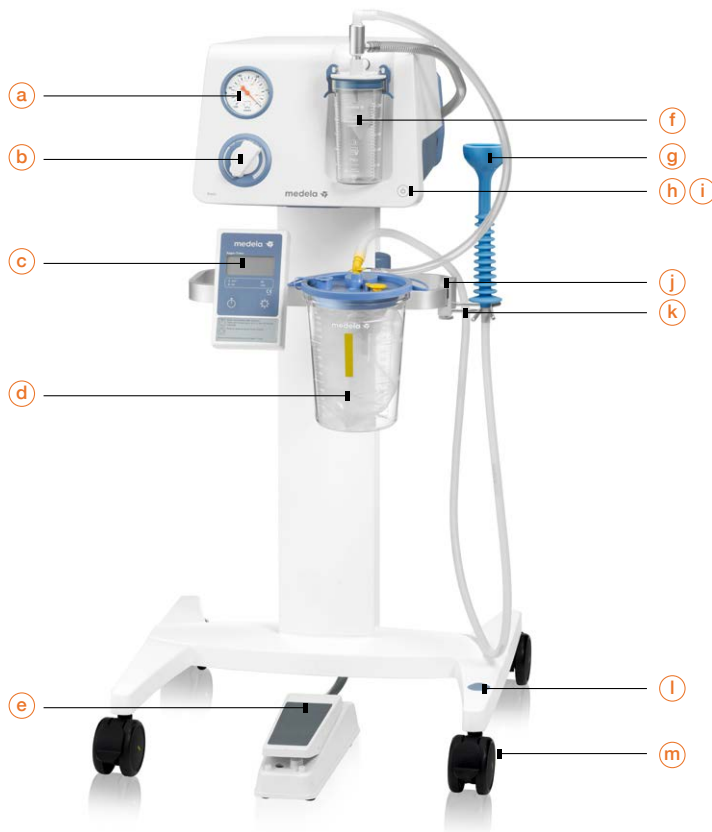

- a Manometer in kPa und mmHg
- b Membran-Vakuumregler
- c Apgar Timer
- d Einweg-Auffangsystem
- e Fußvakuumregler
- f Sicherheits-Set
- g Silc Cup Saugglocke
- h Ein-/Aus-Taste
- i Standby-Anzeige
- j Normschiene
- k Schlauchhalter
- l Fuß-Ein-/Aus-Schalter
- m Vier Rollen mit Bremsen

Kurzinformationen

- Medizinische Fachkräfte profitieren von Medelas 50-jähriger Erfahrung in der medizinischen Vakuumtechnologie.
- Unser Schweizer Entwicklungs- und Herstellungsprozess zeichnet sich durch mechanische Präzision aus und garantiert exzellente Leistung.
- Die elektrische Vakuumerzeugung auf Knopfdruck sorgt für einen schnellen Vakuumaufbau.
- Aktives Vakuum sorgt für festen Halt am Kopf des Fötus und kann ein Ablösen der Glocke verhindern.
- Schnelle Inbetriebnahme durch aufeinander abgestimmte Komponenten.
- Auswahl an Saugglocken verschiedener Art und Größe für eine sichere und individuelle Vakuumextraktion.

Angebot an Medela Saugglocken:

- Große Auswahl an Saugglocken für individuelle Anforderungen
- Saugglocken und Schläuche kompatibel mit Basic Absaugpumpe und anderen manuellen oder elektrischen Absaugpumpen

Starre Saugglocken – für optimalen Halt**Malmström Saugglocke**

- Seit Jahrzehnten bewährt
- Wird bei vorderer Hinterhauptslage des Babys eingesetzt
- Form der Saugglocke ermöglicht festen Halt, um ein Loslösen zu verhindern
- Autoklavierbarer Edelstahl
- Erhältlich mit 40, 50 oder 60 mm Durchmesser



Malmström Saugglocke

Bird Cup Saugglocke

- Meistverkaufte Saugglocke
- Die Form entspricht der Malmström Saugglocke mit separatem Saug- und Zuganschluss
- Autoklavierbarer Edelstahl
- Erhältlich mit 40, 50 oder 60 mm Durchmesser



Bird Cup Saugglocken

Bird Posterior Cup Saugglocke


- Speziell entwickelt für Babys in hinterer Hinterhauptslage
- Vakuumanschluss an der Seite der Saugglocke und geringe Höhe für leichtere Einführung
- Autoklavierbarer Edelstahl
- Durchmesser: 50 mm



Bird Posterior Cup Saugglocke

Einweg Saugglocke Bird Cup

- Polykarbonat-Version des Mehrweg Bird Cups
- Schwenkbarer Griff für einfachere Einführung bei Föten in vorderer und hinterer Hinterhauptslage.
- Durchmesser: 50 mm

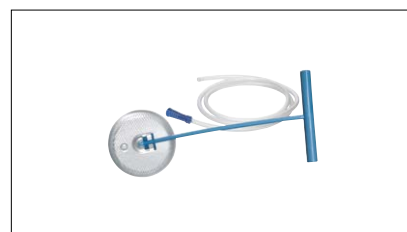


Einweg Saugglocke Bird Cup

Weiche Saugglocken – für eine sanfte Vakuumextraktion

Mehrweg und Einweg SilcCup Saugglocken

- Sanfter Halt am Kopf des Fötus für minimales Verletzungsrisiko
- Einteiliges Design für eine einfache Anwendung
- Glatte Oberfläche mit Längsrille macht Drehbewegungen sichtbar
- Mehrweg Saugglocken aus Silikon (medizinischer Qualität), erhältlich mit Durchmesser von 50 oder 60 mm
- Einweg Saugglocken aus thermoplastischem Elastomer, 60 mm Durchmesser

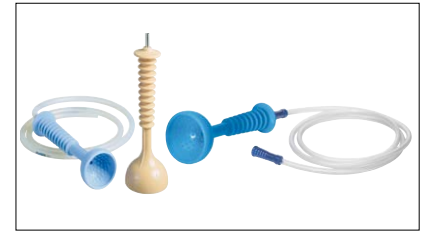

SilcCup Saugglocken

CaesAid Saugglocke für Kaiserschnitte

- Sanfte Unterstützung zum Anheben des Kopfes beim Kaiserschnitt
- Kann an die während der Operation verwendete Absaugpumpe angeschlossen werden
- Autoklavierbares Silikon (medizinischer Qualität)
- Durchmesser: 60 mm


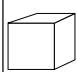
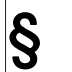





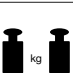


CaesAid Saugglocke

Spezialzubehör

- Fußvakuumregler für handfreien Aufbau und schnellen Abbau des Vakuums
- Mehrweg- oder Einweg-Auffangsystem
- Apgar Timer
- Halter für Schläuche und Zubehör

Technische Daten – Basic Absaugpumpe

 Hochvakuum – 90 kPa – 675 mmHg	 H x B x T (Rack-Version) 210 x 305 x 375 mm	 ISO 9001 ISO 13485 CE (93/42/EWG), IIa 5 Jahre Garantie	 CE 0123
 Hohe Saugleistung 30 l/min	 Strom 100–240V	 CLASS	 IP21
 9,3 kg (Rack-Version)			

Medical Vacuum Technology for Healthcare Professionals

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an uns oder Ihren örtlichen Medela Fachhändler.

 Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar / Switzerland
www.medela.com

Örtlicher Fachhändler

Medela Medizintechnik
GmbH & Co. Handels KG
Postfach 1148
85378 Eching
Germany
Phone +49 (0)89 31 97 59-0
Fax +49 (0)89 31 97 59 99
info@medela.de
www.medela.de

Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar
Switzerland
Phone +41 (0)848 633 352
Fax +41 (0)41 769 51 00
contact@medela.ch
www.medela.ch